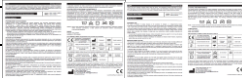


KARTA PRODUKTU

PKT862B

data opracowania:		Karta opracowana przez:							
16.10.2023		Teresa Grycaj		Kołdra pikowana z dwóch różnych kolorów: jedna strona beżowy nadruk na zielonej , druga strona kolor biała gładki.				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy		BIEDRONKA Kołdra BICOLOR SMUKEE HOME 160X200 rozmiar max 160x200cm (+0/-1cm) waga : min - 990 g max - 1040g PKT16-MFAA-PASIANNE 5905428036912 KKN 5 MICROFIBRA DRUKOWANA 72g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-AA-PESIANNE Tk mikrofibra 220, 72gs beżowy nadruk na zielonej- na jedną stronę kołdry SMF22-A1-01-L 72 g colour biały - na drugą stronę kołdry WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 580 G Kanał Fałd co 30cm 							
Nazwa produktu									
Rozmiar									
Rozmiar w tolerancji									
Waga gotowej kołdry									
Kod magazynowy / indeks produktu									
Kod kreskowy EAN									
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF									
Opis materiału / szerokość									
Waga i rodzaj wypełnienia									
Wzór pikowania									
Linia i maszyna		SQUARE CORNER							
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU								PRODUKT Z WSZYWKAMI	
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE - ŁAMÓWKA BIAŁA SQUARE CORNER									
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM		UWAGA KOD KRESKOWY JEST DLA KAŻDEGO KOLORU INDYWIDUALNY					
Wszywki pozostałe		KOŁDRA PRODUKOWANA I PAKOWANA W MIX 5 KOLRÓW							
inne komponenty montowane									
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE								SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		worek foliowy z uchem BEZ NAKŁUĆ 500x830+90 REC							
ZAMKNIĘCIE WORKA		PRASA							
Etykieta informacyjna		ETYKIETA INFORMACYJNA							
		ULOTKA MEDYCZNA							
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE								Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
PAKOWANIE ZBIORCZE		SPARSOWANE KOŁDRY ZAPAKOWANE PO 50 SZT DO SHIPERA OKLEJONE NAKLEJĄ Z INDEKSEM DANEGO KOLORU- PKT16-MFAA-PASIANNE							
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU									
UWAGA : KOŁDRA SPAKOWANA DRUKOWANĄ STRONĄ DO WIERZCHU Z ETYKIETĄ I NFORMACYJNĄ I ULOTKĄ MEDYCZNĄ DO WORKA WŁAŚCIWA DLA WŁAŚCIWEGO KOLORU KOŁDRY, SPRASOWANA . ZAPAKOWANA DO KARTONU PO 60SZT OKLEJONEGO NAKLEJKĄ PKT16-MFAA-PASIANNE PRZYGOTOWANA DO PAKOWANIA ZBIORCZEGO									

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Podstawą leczenia choroby alergicznej jest unikanie alergenów, czyli substancji wywołujących uczucie. Uważa się, że na pokarm polewnyśmy głównie alergen człowieka, czyli roztocze kurzu domowego, nie nierzadko – dlatego kożka o takim alergenem słowni materialu barwnego przez tym alergenem. Co do alergii żywieniowej, to nie ma potrzeby stosowania specjalnego żywienia, a w zapobieganiu i leczeniu przewlekłej choroby alergicznej^{1,2}, jako jeden z elementów wielokierunkowego działania zmierzającego do ograniczenia ekspozycji na alergeny: alergenizacji przewlekłej nieżytu nosa, astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry, innych chorób o podłożu alergicznym itp. Zapalenie spojówek, żłobek, katar, grypę i migotanie powłokien.

Wskazaniem do leczenia choroby alergicznej jest wyznaczenie choroby alergicznej, nie słowno, ale słowno jako jedynego działania zmierzającego do łagodzenia lub zmniejszenia objawów choroby alergicznej.

¹ Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD-10; odpowiednio: J30, J45, L20, H10, J32, J37, J31, J35.

PRZECIWSKAZANIA DO STOSOWANIA
 Nie stosować w przypadku osób, u których stwierdzono uczulenie na poliestr. Nie stosować w bezpośrednim kontakcie ze skórą. Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia. Nie stosować w razie wystąpienia zmian skórnych, innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórę, otwarte niezabezpieczone opatunkiem rany (lub ozdoby).

Wyroby transportowane w ograniczonym opakowaniu. W trakcie transportu i przechowywania, należy zabezpieczyć wyrobę przed zabrudzeniem, zakurzeniem, zakłóceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym. Wyrobę przechowywać w temperaturze od 15°C do 30°C, w suchym, przewietrzonym, pozbawionym wilgoci i nadmiernego światła pomieszczeniu. Nie narażać wyrobów na działanie niskich temperatur i wilgoci. Wyrobę zabezpieczyć przed nadmierną elastycznością na karku, nadmierne odciążenie prowadzi do zmniejszenia trwałości i jakości. Wyrobem nie należy wywierać nadmiernej siły mechanicznej. Proszę konserwować wyrobę odpowiednio, co najmniej 2-3 razy w roku. Nie przechowywać wyrobów zabrudzonych lub zawierających wodę. Nie pracuj z wyrobami innego typu. Po przeprowadzonym prośbie prania należy mocno strząsnąć kofrę. Należy stosować następujące parametry konserwacji wyrobów:

SKŁAD
Poszycie: 100% polyester.
Wypełnienie: 100% polyester.

WYJAŚNIENIE SYMBOLÓW OKRZĄGAJĄCYCH PROCES KONSERWACJI WYROBÓW			
	Makymalna temperatura prania 60°C, proces normalny		Nie stosować bielenia
	Dopuszczalne suszenie w suszarnie bębnowej; temperatura niska; temperatura wysuszenia maks. 60°C		Nie prasować
			Nie czyścić chemicznie

DISCEKNN.RV.0/12.2023 | PL

INSTRUCTIONS FOR USE

The device should be used to cover the whole surface or part of the body, during rest or sleep, for allergy sufferers and healthy people. To ensure proper hygiene conditions, always use the device covered with a cotton case.

The device is a non-invasive medical device intended for repeated use, with limited exposure (maximum daily usage of 10 to 12 hours). In case of prolonged use, it is necessary to aerate the device. The product must be used in accordance with its intended use and other information provided in these Instructions and on the product label.

CONTRA-INDICATIONS FOR USE

Do not use in case of people who are allergic to polyester. Do not use the product in direct contact with the skin. Do not use in children under 3 years of age. Do not use in case of skin disorders, other allergic symptoms and in persons with damaged skin, open wounds not protected by a dressing and/or ulcerations.

WARNINGS

The device is an item of multiple, personal use. For health and hygiene reasons, the device must not be used by more than one person. The device is not intended for use by children. It is mandatory to carry out cleaning of the device and the case before use.

Always use the device covered by the device case.

Do not store or use a damaged or a wet device. Do not use the device in damp or dusty rooms.

Do not use the device if it is damaged, misshapen or heavily (dirty) soiled. In the event of damage or discolouring, the device must be removed, the device must be replaced by a new one.

Due to the effect of wear and tear or the washing process, it is possible for the cover to become pilled or heavily soiled. The device must be replaced by a new one.

Do not use the device for a longer period of use than indicated on the device.

Due to the quality period of use of the device, the device may over time lose its original properties, provided that the device is used in accordance with the instructions and product labels.

Do not use the device for a longer period of use than indicated on the device. The packaging should be removed so that it is not within the reach of children.

In the event of allergic reactions or any other adverse reactions associated with use of the device, discontinue use immediately and consult a doctor.

Cover: 100% polyester.
Filling: 100% polyester.

EXPLANATION OF SYMBOLS INDICATING THE DEVICE MAINTENANCE PROCESS					
	Maximum washing temperature of 60°C, normal process		Do not bleach		Do not dry clean.
	Tumble drying possible, drying at low temperature, exhaust temperature maximum 60°C		Do not iron		

in case of any serious incident related to the device, the manufacturer should be immediately informed in writing to the following address: "John Cotton Europe" Sp. z o.o., ul. John Cotton Europe 1, 59-310 Szczawno-Zdrój, Poland, by phone: +48 74 84 56 448 or electronically at the e-mail address: orders@johncotton.eu. It is also necessary to notify the competent authority of the Member State on whose territory the incident occurred.

 "John Cotton Europe" Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
59-310 Szczawno-Zdrój, Poland
tel.: +48 74 84 56 446 | orders@johncotton.eu
www.johncotton.eu



IJUCEKON/Rev.D12.2023 | EN



IUUCE/KON/Rev.D/12.2023 | EN

