

KARTA PRODUKTU			K770
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
poprawiona karta - PDF 2022.07.01	Teresa Grycaj		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	AUCHAN Kołdra BASIC LIGHT 220x200 rozmiar max 220x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1430g max 1510 g WKL20-MFA1-K770 5905428026517		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	M/JCE/11.2019	KABS 1	
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 72g/m ² -szer.tkaniny 220cm A1-01	SMF22	
Waga i rodzaj wypełnienia	WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 880G		
Wzór pikowania	Kanał Falą co 30cm, ŚCIEG 4,5		
Linia i maszyna	MN7		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
bardzo gęsty overlock szara nić (gęstość ściegu zgodnie z wzorcem)			
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C)		
Wszywki pozostałe inne komponenty montowane			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek foliowy z nadrukiem rolowana 350x780/60	max dł rolki 50cm	
ZAMKNIĘCIE WORKA	duża, okrągła 10cm przezroczysta plomba do zamykania worka		
Etykieta informacyjna	ulotka medyczna		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem 15905428026514	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	10	
	ilość kartonów na palecie	6	
	CHEP		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WSZYWKĄ PIEŁĘGNACYJNĄ WSZYTA 12-15 CM OD DOLNEGO LEWEGO ROGU NA DŁUŻSZEJ STRONIE KOŁDRY. Na wszystkie data produkcji (DD-MM-RRRR). PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU, maksymalna długość rolki 50cm. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE STRONY KARTONU NA ETYKIETACH ZBIORCZYCH NABITA DATA PRODUKCJI + NUMER PAKOWACZA .			

K770

WOREK DO ROLOWANIA Z NADRUKIEM



wszywka pielęgnacyjna na rolce



ULOTKA MEDYCZNA

Przed przystąpieniem do używania wyrobu należy uważnie zapoznać się z instrukcją używania. Instrukcja przekazana jest w celu poinformowania o prawidłowym użytkowaniu wyrobu. Wyrób należy stosować zgodnie ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania wyrobu oraz w każdym przypadku podejrzenia choroby alergicznych należy skonsultować się z lekarzem.

KOŁDRA BASIC LIGHT

REF KABS 1

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Podstawą leczenia chorób alergicznych jest unikanie alergenów, czyli czynników wywołujących uczulenie. Uważa się, że na podłożu poliestrowym główny alergen czuwka, czyli roztocze kurzu domowego, nie namnaża się – dlatego kołdra o takim składzie stanowi materiał barierowy przed tym alergenem. Kołdra Basic Light przeznaczona jest do stosowania wspomagającego w zapobieganiu i łagodzeniu przebiegu poniższych chorób alergicznych⁽¹⁾, jako jeden z elementów wielokierunkowego działania zmierzającego do ograniczenia ekspozycji na alergeny: alergiczny przewłok nosa, astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry, innych chorób o podłożu alergicznym (np. zapalenie spojówek, zatok, krtani, gardła i migdałków podniebnych).

⁽¹⁾ W każdym przypadku podejrzenia choroby alergicznych należy zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować wyrobu jako jedynego środka zmierzającego do łagodzenia lub zmniejszenia objawów choroby alergicznych.

⁽²⁾ Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD-10, odpowiednio: J30, J45, L20, H10, J32, J37, J31, J35.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Kołdra powinna być stosowana do okrywania całej powierzchni lub części ciała, podczas odpoczynku lub snu, u osób cierpiących na alergię (alergików) i osób zdrowych. W celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, wyrób używać zawsze powieszony w przewiewnym miejscu.

Kołdra jest przeznaczonym wyrobem medycznym przeznaczonym do wielokrotnego użycia o ograniczonej ekspozycji (maksymalny czas dziennego użycia od 10 do 12 godzin). W przypadku dłuższego użycia należy odpowiednio przewietrzyć wyrób.

Wyrób stosować zgodnie z przewidzianym zastosowaniem oraz z informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji.

PRZECIWSKAZANIA DO STOSOWANIA

Nie stosować w przypadku osób, u których stwierdzono uczulenie na poliestr. Nie stosować w razie wystąpienia zmian skórnych, innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórę, owalne niezabezpieczone opatrunkiem rany (lub otwarczenia).

OSTRZEŻENIA

Wyrób jest wyrobem wielokrotnego, osobistego użycia. Ze względów zdrowotnych i higienicznych, wyrób nie może być jednocześnie lub ponownie używany przez inne osoby. W przypadku konieczności ponownego użycia przez inne osoby, przed użyciem należy obowiązkowo przeprowadzić proces prania wyrobu i stosowanej poszewki.

Wyrób należy stosować zawsze powieszony w dodatkowej poszewce.

Nie przechowywać oraz nie używać wyrobu zawilgoconego (lub przemoczonego). Nie stosować wyrobu w wilgotnych, zakurzonych pomieszczeniach.

Nie stosować wyrobu w przypadku uszkodzenia, zniekształcenia lub zabrudzenia (znacznego zanieczyszczenia). W razie uszkodzenia lub w przypadku znaczących niemożliwych do usunięcia zabrudzeń, należy wymienić wyrób na nowy.

Pod wpływem okresu użytkowania lub przeprowadzonych procesów prania możliwe jest zmniejszenie lub zmiana barwy poszewki (złotnienie), a także odjęcie możliwości zbrzytania się wypełnienia wyrobu.

Gwarantowany okres użytkowania wyrobu wynosi 2 lata, bez utraty pierwotnych właściwości, przy zachowaniu stosowania wyrobu zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji i w jego oznakowaniu.

W przypadku pojawienia się reakcji uczuleniowych lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych związanych z użytkowaniem wyrobu, należy natychmiast zaprzestania używania i skonsultować się z lekarzem.

SPOSÓB PRZECZYSZCZANIA I KONSERWACJI

Wyrób należy transportować w oryginalnym opakowaniu. W trakcie transportu i przechowywania należy zabezpieczyć wyrób przed zabrudzeniem, zakurzeniem, zawilgoconiem oraz uszkodzeniem mechanicznym.

Wyrób przechowywać i używać w suchym, przewiewnym, pozbawionym wilgoci i nadmiernego kurzu pomieszczeniu. Nie narażać wyrobu na działanie niskich temperatur i wilgoci. Wyrób zabezpieczyć przed nadmierną ekspozycją na kurz, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródła ciepła (np. kaloryfery, grzejniki, piecyki). Wyrób powinien być poddawany, co najmniej 2-3 procesom konserwacji w ciągu roku. Nie przechowywać wyrobu zabrudzonego lub zawilgoconego. Nie prać z wyrobami innego typu. Po przeprowadzonym procesie prania należy mocno strząsnąć kołdrę.

NALEŻY STOSOWAĆ NASTĘPUJĄCE PARAMETRY PROCESU KONSERWACJI:

	Makymalna temperatura prania 60°C, proces normalny		Dopuszczalne skucie w skucie bębnowej (temperatura niskiej, temperatura wyjściowa maks. 60°C)		Nie czyścić chemicznie
	Nie stosować odbleśniacza		Nie prasować		

WYJAŚNIENIE SYMBOLI STOSOWANYCH W OZNAKOWANIU WYROBU

	Nazwa i adres wytwórcy		Znak CE (potwierdzenie zgodności z dyrektywą Rady 93/42/EWG)		Model		Data wytworzenia
	Informacje dodatkowe na opakowaniu (etykiecie)		Konieczność zapoznania się z instrukcją użytkowania, przed rozpoczęciem stosowania		Chronić przed działaniem promieni słonecznych		Przechowywać w suchym miejscu

UWAGA: Wyrób należy poddawać okresowej procedurze prania w wysokiej temperaturze, okresowemu działaniu niskich temperatur (zamrażaniu), a także zalecane jest stosowanie środków roztoczoobójczych, w celu eliminacji alergenów.

SKŁAD

Poszewka: 100% poliestr (mikrofibra).

Wypełnienie: 100% poliestr silikonowany.

ROZMIAR


Rozmiar wyrobu podany na etykiecie.

WYTWÓRCA
JOHN COTTON EUROPE SP. Z O.O.
ul. Szczawińska 1, 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Szczawińska 1
tel.: +48 74 84 56 446, fax: +48 74 84 56 629
www.johncotton.eu



Numer i data wydania instrukcji: IUJCE/KABS/Rev 011.2019

etykieta zbiorcza na karton

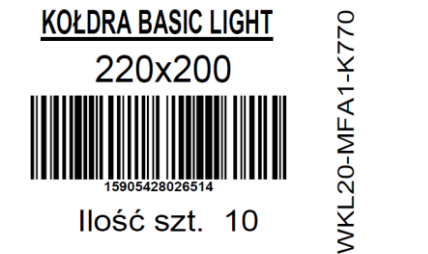

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			K770	AUCHAN
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			Kołdra BASIC LIGHT	
OPRACOWANE przez /PREPARED by			220x200	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			bardzo gęsty overlock szara nić	
/date/			DATA:18.09.2019	
/signature/				
/signature/				
PRODUKT			Mikrofibra Biała 72g/m2	
Kod magazynowy / MFG indeks				
Code / MFG				
TKANINA WIERZCHNIA			4,60 mb	
FABRIC TOP			5%	
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu			2 x 230 x 220 cm	
+ % Odpadu			2%+6	
Rozmiar panelu (rozkroju)				
Panel size				
TKANINA SPODNIA				
FABRIC BOTTOM			SMF22-A1-01	
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu				
+ % Odpadu				
Rozmiar panelu (rozkroju)				
Panel size				
TKANINA WEWNĘTRZNA				
COROVIN				
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu				
+ % Odpadu				
Rozmiar panelu (rozkroju)				
Panel size				
KROJENIE				
CUTTING				
Linia nr				
Wydajność na 1 osobe / zmianę				
Current Speed per 1 person / shift				
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)			MN7 overlock	
CARDING (FIBRE)			390szt flis	
Linia nr			880g 200 g/m² 50/50% SPS64-HCS , SPB6,7 /60 - REPRO	
Wydajność na 1 osobe / zmianę			7%	
Waga z rozkroju i z wykurczem				
+% Odpadu				
Scrap %				
WZÓR PIKOWANIA			MN7 overlock	
QUILTING			390szt kanał falą [-30% od podstawy wydajności 900mb	
Linia nr			overlock z 4-ch stron	
			- igły 54,00mb nici szare gęsty owerlok zwiększone zużycie nici	
			- chwytacze - 177,00mb = [0,0124kg bardzo gesty overlock % nici szare	
Nici -Zużycie w metrach bieżących			NG - 28,00mb - polystrong	
			ND - 32,00mb - bobins Durafix	
KROJENIE (PK)				
CUTTING				
Linia nr				
Wydajność na 1 osobe / zmianę				
Current Speed per 1 person / shift				
SZYCIE I WYKONCZENIE			bardzo gęsty overlock szara nić (gęstość ściegu zgodnie z wzorcem)	
BINDING			zwiększone zużycie nici na overlock	
Wydajność na 1 zmianę				
Zużycie nici w metrach bieżących				
Napy w szt				
LAMOWKA (SZNUREK)				
BINDING			max dł rolki 42cm, wielkość nadruku 34x18cm	
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu				
+ % Odpadu				
Scrap %				
PACKAGING			390szt worek foliowy z nadrukiem rolowana	
Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba				
Zgrzewanie + prasa / 1 osoba				
Wkładanie do kartonu / 1 osoba			1000 szt kx10	
Rolowanie / 1 osoba				
			800X600X500	
OPIS DODATKOWY			waga gotowej kołdry	
ADDITIONAL DESCRIPTION			220x200 - 630g	
			880g	
			waga : min - 1430g max 1510 g	