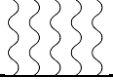
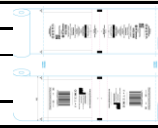


KARTA PRODUKTU		K805	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.09	2020-06-16 Alicja Kubik		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	KOŁDRA Pro Comfort 220x200 rozmiar max 220x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1860g max - 1950g WKT20-MFA1-K805 5905428028085 REF KCF 1 MICROFIBRA BIAŁA 72g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-01 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1320 G KANAL falą 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE - PINSONICZNE			
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA satynowa na rolce Z DATĄ PRODUKCJI		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	torba szara flizelinowa 40x60x20 cm		
ZAMKNIECIE	ZAMEK		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA + ULOTKA MEDYCZNA *		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	5	
	ilość kartonów na palecie	6 kartonów na palecie (max. Wys. 1,8 m)	
	CHEP		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywka z wydrukowanym LOT WW/RR. Kołdra pakowana do torby z etykietą. PAKOWANIE I SKŁADANIE W/G WZORU. Na karton etykiety zbiorcze wg projektu.			

* ULOTKA MEDYCZNA WKŁADANA DO CHWILI , AŻ DOJADA ETYKIETY Z NADRUKWANĄ NA ODWRÓCIE ULOTKA MEDYCZNA

* ULOTKA MEDYCZNA WKŁADANA DO CHWILI , AŻ DOJADĄ ETYKIETY Z NADRUKWANĄ NA ODWROCIE ULOTKĄ MEDYCZNĄ

etykieta zbiorcza na karton

John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Szczawińska 1
tel : +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 629

REF

KCF 1

ilość sztuk: 5

05905428098088

LOT

37/20

CE

WKT20-MFA2-K805

wszywka pielęgniacyjna

ulotka medyczna

instrukcja użytkownika

Przed przystąpieniem do używania wyrobu należy uważnie zapoznać się z instrukcją użytkownika. Instrukcja przekazana jest w celu poinformowania o prawidłowym użytkowaniu wyrobu. Wyrób należy stosować zgodnie ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania wyrobu oraz w każdym przypadku podejrzenia choroby alergicznych należy skonsultować się z lekarzem.

KOŁDRA PROCOMFORT

REF

KCF 1

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Podstawą leczenia chorób alergicznych jest unikanie alergenów, czyli czynników wywołujących uczulenie. Udowodniono, że na podłożu poliestrowym główny alergen człowieka, czyli roztocze kurzu domowego, nie namnaża się – dlatego kółdra o takim składzie stanowi materiał barierowy przed tym alergenem. Kółdra ProComfort przeznaczona jest do stosowania wspomagającego* w zapobieganiu i łagodzeniu przebiegu poniszszych chorób alergicznych**.

W każdym przypadku podejrzenia chorób alergicznych należy zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować wyrobu jako jedynego środka zmierzającego do łagodzenia lub zmniejszania objawów chorób alergicznych.

** Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD-10; odpowiednio: J30, J45, L20, H10, J32, J37, J31, J35.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Kółdra powinna być stosowana do okrywania całej powierzchni lub części ciała, podczas odpoczynku lub snu, u osób cierpiących na alergię (alergików) i osób zdrowych. W celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, wyrób używać zawsze powieszony w poszewce bawełnianej. Kółdra jest nieinwazyjnym wyrobem medycznym przeznaczonym do wielokrotnego użycia, o ograniczonej ekspozycji (maksymalny czas dziennego użytkowania od 10 do 12 godzin). W przypadku dłuższego użycia należy obowiązkowo przewietrzyć wyrób. Wyrób stosować zgodnie z przewidzianym zastosowaniem oraz z informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji.

PRZECIWSKAZANIA DO STOSOWANIA

Nie stosować w przypadku osób, u których stwierdzono uczulenie na poliestr. Nie stosować w razie wystąpienia zmian skórnych, innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórę, otwarte niezabezpieczone opatrunkiem rany i/lub owrzodzenia.

OSTRZEŻENIA

Wyrób jest wyrobem wielokrotnego, osobistego użytku. Ze względów zdrowotnych i higienicznych, wyrób nie może być jednocześnie lub ponownie używany przez inne osoby. W przypadku konieczności ponownego użycia przez inne osoby, przed użyciem należy obowiązkowo przeprowadzić proces prania wyrobu i stosowanej poszewki.

Wyrób należy stosować zawsze powieszony w dodatkowej poszewce.

Nie przechowywać oraz nie używać wyrobu zawilgoconego i/lub przemoczonego. Nie stosować wyrobu w wilgotnych, zakurzonych pomieszczeniach.

Nie stosować wyrobu w przypadku uszkodzenia, zniekształcenia lub zabrudzenia (znacznego zanieczyszczenia). W razie uszkodzenia lub w przypadku znacznych niemożliwych do usunięcia zabrudzeń, należy wymienić wyrób na nowy.

Pod wpływem okresu użytkowania lub przeprowadzonych procesów prania możliwe jest zmechcanie lub zmiana barwy poszewicy (złócenie), a także istnieje możliwość zbytniego się wypełnienia wyrobu. Gwarantowany okres użytkowania wyrobu wynosi 2 lata, bez ułudy powyższych właściwości, przy zaleceniu stosowania wyrobu zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji i w jego oznakowaniu.

Opakowanie foliowe może być niebezpieczne dla dzieci. Po rozpakowaniu wyrobu należy usunąć opakowanie, aby nie pozostawało w zasięgu dzieci.

W przypadku pojawienia się reakcji uczuleniowych lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych związanych z użytkowaniem wyrobu, należy natychmiast zaprzestać używania i skonsultować się z lekarzem.

SPOSÓB PRZECZYSZCZANIA I KONSERWACJI

Wyrób należy transportować w oryginalnym opakowaniu. W trakcie transportu i przechowywania należy zabezpieczyć wyrób przed zabrudzeniem, zakurzeniem, zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym. Wyrób przechowywać i używać w suchym, przewiewnym, pozbawionym wilgoci i nadmiernej kurzu pomieszczeniu. Nie narażać wyrobu na działanie niskich temperatur i wilgoci. Wyrób zabezpieczyć przed nadmierną ekspozycją na kurz, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródła ciepła (np. kaloryfery, grzejniki, piece). Wyrób powinien być poddawany, co najmniej 2-3 procesom konserwacji w ciągu roku. Nie przechowywać wyrobu zabrudzonego lub zawilgoconego. Nie prać z wyrobami innego typu. Po przeprowadzonym procesie prania należy mocno strząsnąć kółdrę.

NALEŻY STOSOWAĆ NASTĘPUJĄCE PARAMETRY PROCESU KONSERWACJI:

	Maksymalna temperatura prania 60°C, proces normalny.		Suszyć z oczekiwanym w stanie rozłożonym na płasko.		Nie czyścić chemicznie.
	Nie stosować żelazna.		Nie prasować.		

WYJAŚNIENIE SYMBOLI STOSOWANYCH W OZNAKOWANIU WYROBU

	Nazwa i adres wytwórcy.		Znak CE (potwierdzenie zgodności z Dyrektywą Rady 93/42/EWG).		Model.		Numer serii.
	Informacje reklamacyjne na opakowaniu (etykiecie).		Konieczność zapoznania się z instrukcją użytkowania, przed rozpoczęciem stosowania.		Chronić przed działaniem promieni słonecznych.		Przechowywać w suchym miejscu.

UWAGA: Wyrób należy poddawać okresowej procedurze prania w wysokiej temperaturze, okresowemu działaniu niskich temperatur (zamrażaniu), a także zalecane jest stosowanie środków rozcieńczających, w celu eliminacji alergenów.

SKŁAD

Poszycie: 100% poliestr (mikrofibra).

Wypełnienie: 100% poliestr (włókno poliestrowe, karbowane, sprężyste, z recyklingu).

ROZMIAR

Rozmiar wyrobu podany na etykiecie.

WYTWÓRCA

JOHN COTTON EUROPE SP. Z O.O.

ul. Szczawińska 1, 58-310 Szczawno-Zdrój, Polska

tel.: +48 74 84 56 446

www.johncotton.eu

CE

Numer i data wydania instrukcji: IUJCE/KCF/Rev 007/2020

KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION				K805
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM				KOŁDRA Pro Comfort
				220x200 Mono
/date/	/signature/	/signature/		zmiana tkaniny z 240cm na 220cm 28.09.2023 T.G
	E.Sajko			31.07.2020
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		MIKROFIBRA biała 72g/m2 220 szer.
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		4,9 mb
	+ % Odpadu	Scrap %		5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		2x245x220
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number		LINIA MN 1 - 1003 pinsonic
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		550szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight		1320g WŁÓKNO SILICON REGENERAT SPS64 -HCS
	'+% Odpadu	Scrap %		5%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 1070a PINSONIC kanał falą 1800mb	LINIA MN 1 - 1003 pinsonic Kanał falą 1300mb
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	770 szt.	550szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		NG - 34,00 mb snp75-a2 ND - 31,00 mb SND180-A2
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		wykończenie -pinsonic wszywka satynowa na rolce z datą produkcji
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę			
	Napy w szt			
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		350 szt, pakowana do torby flizelinowej+ etykieta
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		800szt kx5
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION				karton zbiorczy 800x600x500 T3W 550g/m2
				waga koldry na gotowo
				200x220 630g waga wypełnienia - 1320g
				waga : min - 1860g max - 1950g