

13.11.2019 zmiana worka,
wszywki i ulotki med.. - adres
Szczawno

Alicja Kubik

JYSK Bułgaria


OPIS		KOD	
PRODUKT FINAL GOOD	Opis	PODUSZKA PIKOWANA SOLA	
	Rozmiar	70x80	
	Rozmiar w tolerancji	+/- 2 %	
	Waga w tolerancji	1100g [+/-5%] 1050g - 1160g	
	Kod magazynowy / MFG indeks	WPP70-MFA1-P485B	
	Kod kreskowy	5905428-015504	
	JYSK art.. No.:	71168001 / 4216501	
	PKWiU:		
POSZEWKA	Opis materiału / szerokość	Poszewka kupowna z wszywką	
FABRIC	Kod magazynowy	SPP70-MFA1-P485	
ZGRZEBLANIE	Opis wypełnienia / kod magazynowy	silikon regenerat	SPS32-HCS
CARDING	Waga	900g	
PIKOWANIE	Wzór pikowania	FALA 5CM , PIKOWANIE SCIEGIEM 4	
SZYCIE I WYKONCZENIE	Rodzaj wykonczenia	ZASZYWANA NA OVERLOCKU	
	Wsz.pielęgnacyjna / kod magazynowy	Wszywka JYSK z kodem	SWKJD-40
	Linia i maszyna	P1 - 1004	
	Nici - opis / kod magazynowy		
PAKOWANIE	Rodzaj pakowania (prasowanie, czyszczenie)	WOREK jednostkowy + ulotka med. / prasa	
PACKAGING	Worek folia-rozmiar / kod magazynowy	worek z nadrukiem (dziurkowany)	sfw80-55g
	ulotka informacyjna / kod magazynowy	ulotka medyczna	SUM-09a
	Worek folia-rozmiar / kod magazynowy	worek zbiorczy 700x1100 antyuduszeniowy na 4 szt.	SFW70-60-04-AU
	Ilość wyrobów w 1 worku / torbie	1	
	Karton - rozmiar / kod magazynowy	800X600X500	SKT80-3S-570
	Ilość wyrobów w 1 kartonie	8	
	Etykieta ZBIORCZA / kod magazynowy	ZGODNIE Z WYMOGAMI JYSK	PNK-02
TRANSPORT	Metoda	PALETY EURO	
	Etykieta ZBIORCZA / kod magazynowy	etykieta na paletę z EAN zbiorczym 5905428025510	PNK-09
	Ilość opakowań na 1 palecie	8	

WSZYWKĄ PIELĘGNACYJNA z KODEM KRESKOWYM NA WIERZCHU WSZYTA PRZY ZASZYWANIU PODUSZKI. Ulotka medyczna wkładana z tyłu. Do worka zbiorczego po 4 szt. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE STRONY KARTONU NA ETYKIETACH ZBIORCZYCH NABITA DATA PRODUKCJI + NUMER PAKOWACZA.

2022-02-28 12:54

wszywka pielęgnacyjna na rolce

etykieta na

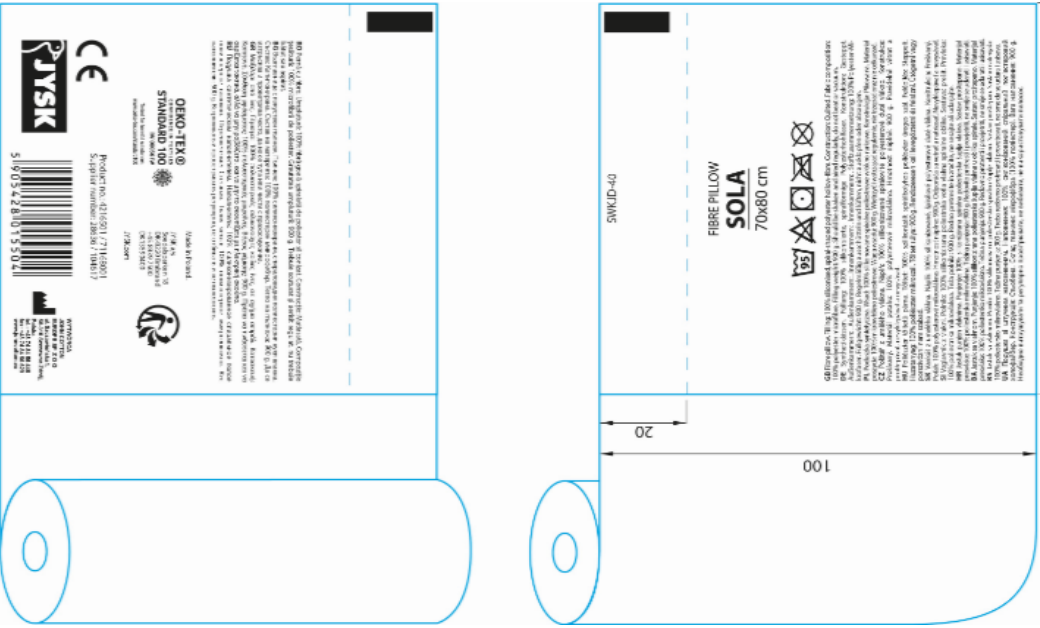

ulotka medyczna



Przed przystąpieniem do używania wyrobu należy uważnie zapoznać się z instrukcją używania. Instrukcja przekazana jest w celu poinformowania o prawidłowym użytkowaniu wyrobu. Wyrób należy stosować zgodnie ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania wyrobu oraz w każdym przypadku podejrzenia chorób alergicznych należy skonsultować się z lekarzem.

SOLA FIBRE PILLOW

REF PSL 1

„POZYTYWNA OPINIA INSTYTUTU MATKI I DZIECKA NR OP-4991, WAŻNA DO 15.10.2020 R.”

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Podstawą leczenia chorób alergicznych jest unikanie alergenów, czyli czynników wywołujących uczulenie. Udowodniono, że na podłożu poliestrowym główny alergen człowieka, czyli roztocze kurzu domowego, nie namnaża się – dlatego poduszka o takim składzie stanowi materiał barierowy przed tym alergenem. Poduszka przeznaczona jest do stosowania wspomagającego¹⁾ w zapobieganiu i łagodzeniu przebiegu poniższych chorób alergicznych²⁾, jako jeden z elementów wielokierunkowego działania zmierzającego do ograniczenia ekspozycji na alergeny: alergiczny przewlekły nieżyt nosa, astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry, innych chorób o podłożu alergicznym (np. zapalenie spojówek, zatok, krtani, gardła i migdałków podniebnych).

¹⁾ W każdym przypadku podejrzenia chorób alergicznych należy zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować wyrobu jako jedynego środka zmierzającego do łagodzenia lub zmniejszania objawów chorób alergicznych.

²⁾ Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD-10; odpowiednio: J30, J45, L20, H10, J32, J37, J31, J35.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Poduszka powinna być stosowana pod głowę i/lub w odcinku szyjnym kręgosłupa, podczas odpoczynku lub snu, u osób cierpiących na alergię (alergików) i osób zdrowych. W celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, wyrób używać zawsze powleczonej w poszewkę bawełnianą. Należy codziennie strząsnąć poduszkę, aby zapobiec zbrzydaniu się jej wypełnienia.

Poduszka jest nieinwazyjnym wyrobem medycznym przeznaczonym do wielokrotnego użycia, o ograniczonej ekspozycji (maksymalny czas dziennego używania od 10 do 12 godzin). W przypadku dłuższego użycia należy obowiązkowo przewietrzyć wyrób. Wyrób stosować zgodnie z przewidzianym zastosowaniem oraz z informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji.

PRZECIWSKAZANIA DO STOSOWANIA

Nie stosować w przypadku osób, u których stwierdzono uczulenie na poliestr. Nie stosować w razie wystąpienia zmian skórnych, innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórę, otwarte niezabezpieczone opatrunkiem rany i/lub owrzodzenia.

OSTRZEŻENIA

Wyrób jest wyrobem wielokrotnego, osobistego użytku. Ze względów zdrowotnych i higienicznych, wyrób nie może być jednocześnie lub ponownie używany przez inne osoby. W przypadku konieczności ponownego użycia przez inne osoby, przed użyciem należy obowiązkowo przeprowadzić proces prania wyrobu i stosowanej poszewki.

Wyrób należy stosować zawsze powleczonej w dodatkową poszewkę. Specjalnie nie zalecają stosowania zwykłych poduszek u noworodków i niemowląt w pierwszym roku życia. Natomiast nie ma żadnych przeciwwskazań do stosowania kołder u noworodków i niemowląt w pierwszym roku życia.

Nie przechowywać oraz nie używać wyrobu zawilgoconego i/lub przemoczzonego. Nie stosować wyrobu w wilgotnych, zakurzonych pomieszczeniach.

Nie stosować wyrobu w przypadku uszkodzenia, zniekształcenia lub zabrudzenia (znacznego zanieczyszczenia). W razie uszkodzenia lub w przypadku znacznych niemożliwych do usunięcia zabrudzeń, należy wymienić wyrób na nowy.

Pod wpływem okresu używania lub przeprowadzonych procesów prania możliwe jest zmechanienie lub zmiana barwy pościści (zżółknienie), a także istnieje możliwość zbrzydlenia się wypełnienia wyrobu.

Gwarantowany okres użytkowania wyrobu wynosi 2 lata, bez utraty pierwotnych właściwości, przy założeniu stosowania wyrobu zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji i w jego oznakowaniu.

Opakowanie foliowe może być niebezpieczne dla dzieci. Po rozpakowaniu wyrobu należy usunąć opakowanie, aby nie pozostawiało w zasięgu dzieci.

W przypadku pojawienia się reakcji uczuleniowych lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych związanych z użytkowaniem wyrobu, należy natychmiast zaprzestać używania i skonsultować się z lekarzem.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI

Wyrób należy transportować w oryginalnym opakowaniu. W trakcie transportu i przechowywania należy zabezpieczyć wyrób przed zabrudzeniem, zakurzeniem, zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym.

Wyrób przechowywać i używać w suchym, przewiewnym, pozbawionym wilgoci i nadmiernego kurzu pomieszczeniu. Nie narażać wyrobu na działanie niskich temperatur i wilgoci. Wyrób zabezpieczyć przed nadmierną ekspozycją na kurz, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła (np. kaloryfery, grzejniki, piecyki). Wyrób powinien być poddawany, co najmniej 2-3 procesom konserwacji w ciągu roku. Nie przechowywać wyrobu zabrudzonego lub zawilgoconego. Nie prać z wyrobami innego typu. Po przeprowadzonym procesie prania należy mocno strząsnąć poduszkę.

NALEŻY STOSOWAĆ NASTĘPUJĄCE PARAMETRY PROCESU KONSERWACJI:

	Maksymalna temperatura prania: 95°C, proces normalny.		Dopuszczalne suszenie w suszarni bębnowej (temperatura niskiej, temperatura wyjściowa maks. 60°C).		Nie czyścić chemicznie.
	Nie stosować bielenia.		Nie prasować.		

WYJAŚNIENIE SYMBOLI STOSOWANYCH W OZNAKOWANIU WYROBU

	Nazwa i adres wytwórcy.		Znak CE (potwierdzenie zgodności z Dyrektywą Rady 93/42/EWG).		Model.		Data wytwarzania.
	Informacje nieumieszczone na opakowaniu (etykiecie).		Konieczność zapoznania się z instrukcją używania, przed rozpoczęciem stosowania.		Chroń przed działaniem promieni słonecznych.		Przechowywać w suchym miejscu.

UWAGA: Wyrób należy poddawać okresowej procedurze prania w wysokiej temperaturze, okresowemu działaniu niskich temperatur (zamarzaniu), a także zalecane jest stosowanie środków rozcieńczających, w celu eliminacji alergenów.

SKŁAD

Materiał pościści: 100% mikrowłókno poliestrowe.

Wsad: 100% silikonowane spiralne poliestrowe włókno rurkowe.

ROZMIAR

Rozmiar wyrobu podany na etykiecie.

WYTWÓRCA


JOHN COTTON EUROPE SP. Z O.O.
ul. Szczawieńska 1, 58-310 Szczawno-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 84 56 446; fax: +48 74 84 56 629
www.johncotton.eu




Numer i data wydania instrukcji: IUJUCE/PSL/Rev.1/08 2019

WPP70-MFA1-P485B

JYSK product number 71168001 / 4216501
JYSK product text **SOLA**
Size 70 x 80
Colour White
Quantity in cardboard box 8
Barcode 5905428015504
Gross weight kg 11,24
Net weight kg 9,54
Cardboard box size W60 x L80 x H50

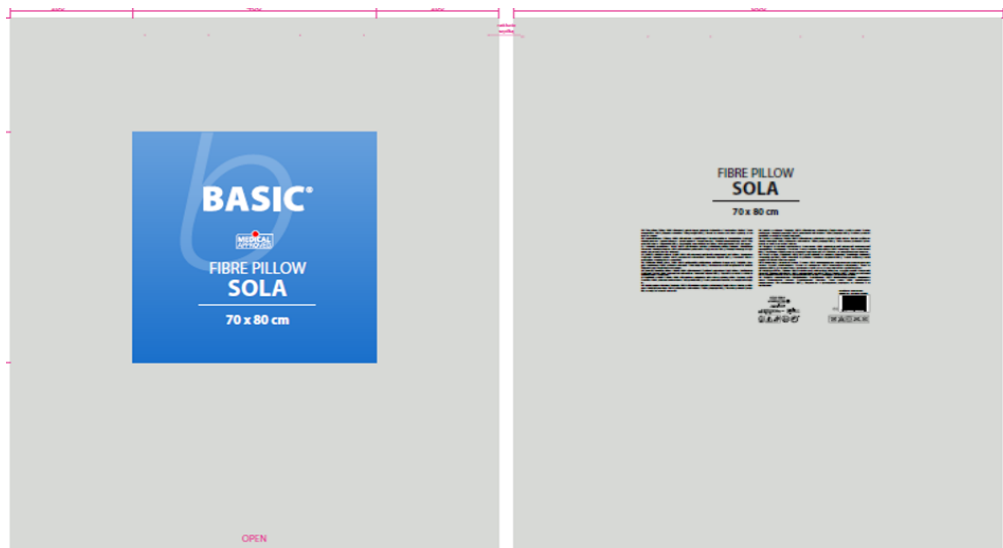

PODUSZKA - SCHEMAT WSZYCIA WSZYWEK

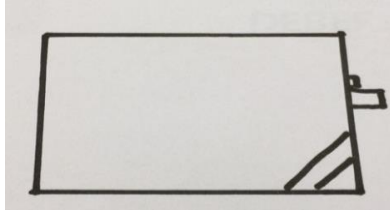


1. WSZYWKA NAROŻNA MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ NA DOLE PO PRAWEJ, NA SZERSZEJ STRONIE PODUSZKI.
2. WSZYWKA PIELĘGNACYJNA + (EWENTUALNIE) OEKO-TEX MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ PO PRAWEJ NA WĘŻSZEJ STRONIE PODUSZKI, 5CM OD WSZYWKI NAROŻNEJ.
3. JEŻELI W PODUSZCE NIE MA WSZYWKI NAROŻNEJ TO WSZYWAMY WSZYWKĘ PIELĘGNACYJNĄ 10cm OD DOLNEGO PRAWEGO ROGU, NA KRÓTSZYM BOKU

Jeśli poduszki są z wypustką, wszywka powinna być wszywana pod wypustkę, jak na załączonym zdjęciu.



KOŁDRA - SCHEMAT WSZYCIA WSZYWEK

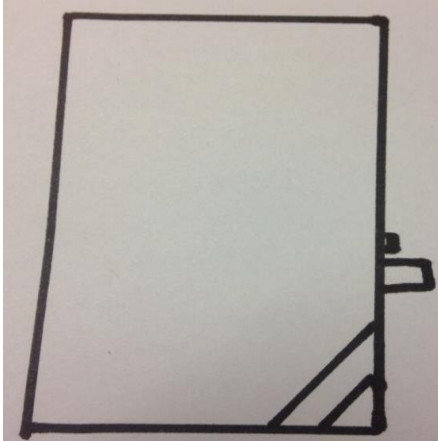

1. WSZYWKA NARÓZNA MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ ZAWSZE PO PRAWEJ STRONIE KOŁDRY U DOŁU. DOTYCZY WSZYSTKICH ROZMIARÓW KOŁDER.
2. WSZYWKA PIELĘGNACYJNA + (EWENTUALNIE) OEKO TEX MUSI BYĆ ZAWSZE PO PRAWEJ STRONIE, 5cm OD WSZYWKI NARÓZNEJ- JAK POKAZANO NA RYSUNKU.
3. JEZELI NIE MA W KOŁDRZE WSZYWKI NARÓZNEJ TO WSZYWAMY WSZYWKĘ PIELĘGNACYJNĄ 20CM OD DOLNEGO, PRAWEGO ROGU.
4. W kołdrach z HAVIC'a wszywka logiem do góry, 20cm od rogu.