



KARTA PRODUKTU			P619	
Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta - PDF 2022.08.03			Teresa Grycaj	
Klient / Kraj dostawy	AUCHAN			
Nazwa produktu	PODUSZKA BASIC SOFT Actuel			
Rozmiar	50x60			
Rozmiar w tolerancji	+/- 2 cm			
Waga gotowego wyrobu	waga min - 350g max -370g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPA50-MFA1-P619			
Kod kreskowy EAN	5905428026777			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	M/JCE/11.2019			
Opis materialu / szerokość	PARS 1			
Opis poszewki/Wzór pikowania	Mikrofibra Biała 72 g/m ² - szer tkaniny 220 cm			
	SMF22-A1-01			
	gładka poszewka przewracana szwem do środka			
Waga i rodzaj wypełnienia	PA50-MFA1-P596			
Linia i maszyna	330 g poliester regenerat nie skręcony			
	AUTOTIC 1 / P4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE				
Wszywka pielęgncyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C)			
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek z nadrukiem 500x680			
zamknięcie worka/torby	PRASA			
Etykieta informacyjna	ULOTKA MEDYCZNA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem 15905428026774		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	14		
	ilość kartonów na palecie	6		
	CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
WSZYWKA PIEŁĘGNACYJNA WSZYTA PRZY ZASZYWANIU PODUSZKI. Na wszywce WBIĆ PRZED SPAKOWANIEM data produkcji (DD-MM-RRRR) + numer szwacza . PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE STRONY KARTONU NA ETYKIETACH ZBIORCZYCH NABITA DATA PRODUKCJI + NUMER PAKOWACZA.				

nadruk na worku

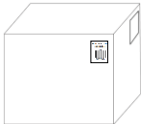

etykieta na karton zbiorczy


50x60

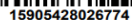

ilość szt. 14

WPA50-MFA1-P619

ulotka z instrukcją do wyrobu medycznego

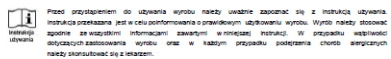

PODUSZKA BASIC SOFT

REF PABS 1

Podstawy leczenia chorób alergicznych jest unikanie alergenów, czyli czynników wywołujących uszkodzenie. Uważano, że na podłożu podrażnienia błony śluzowej człowieka, który natłuszcza krowy domowego, nie namnaża się śluz, dlatego podaje się takim zwierzętom materiał barwny przetransformowany przez bakterie. Produkata Basic Soft przeznaczoną jest do stosowania w miedziopach¹⁰ w zapobieganiu i łagodzeniu przebiegu ponowionych chorób alergicznych¹¹, jako jeden z elementów wielokierunkowego działania immunomodulatora o ograniczaniu ekspozycji na alergeny; alergeny przewleki nieżyt nosa, astma oskrzelowa, atopia zapalna i inne. Wzrost chorób o podłożu alergicznym np. zapalenie skóry, astma, choroby gałki i rogówki podostreżeni.

¹⁰ W kabinie oczyszczania powietrza chorób alergicznych należy zaizolować zwierzęta. Nie stosować zwierząt jako podłoża do leczenia zwierząt o łagodzie lub zmniejszając ich odporność na choroby alergiczne.

¹¹ Według Ministerstwa Zdrowia (Statystyczny Krajowy) Choroby Zakaźnych, ICD-10 odpowiednio: J35, J45, J48, H10, J22, J27, J31, J25.

SPRÓBA UŻYTKOWNIKA

Podstawa powinna być stosowana pod głowę (lub w dowolnym punkcie stykającym się z głową), podczas odpoczynku lub snu, o co najmniej 15 minut przed snem (serwis i instrukcja). W celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, należy używać szalek i szalików z powłoką bawełnianą. Należy codziennie strząsać podstawkę, aby zapobiec zbrudzeniu się jej wypełnienia.

Podstawa jest nieważnym wyrobem medycznym przeznaczonym do elektrycznego użytku, o ograniczonej efektywności (maksymalny czas dziennego użytkowania od 10 do 12 godzin). W przypadku dłuższego użytku należy obowiązkowo przemyć wyrobę. Wyrobę stosować zgodnie z przewidzianym zastosowaniem oraz z informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji.

Nie stosować w przypadku osób, u których stwierdzono uczulenie na poliestry. Nie stosować w razie wystąpienia zmian skórnych, innych objawów alergicznych, a także u osób mających opaloną skórę, otwarte, niezabezpieczone opatrunkiem rany (lub owrzodzenia).

Wyrzół nie wywołuje niebezpieczeństwa, osobistego zdrowia. Za wyjątków zdrowotnych i higienicznych, wyrzół nie może być przenoszona lub powonnie używana przez inne osoby. W przypadku konieczności ponownego użycia sprasy inne osoby, sprasy wyrzółu należy obowiązkowo przeprowadzić procesy prania wyrzółu i stosować poszoki.

Wyrzół należy stosować zawsze połączony z dodatkową poszoką.

Nie przechowywać oraz nie używać wyrzółu zainfekowanego lub zanieczyszczonego. Nie stosować wyrzółu w miejscach, zainfekowanych poszczepianiami.

Nie stosować wyrzółu w przypadku uszkodzenia, zanieczyszczenia lub zabrudzenia (wymagającego zanieczyszczenia). W razie uszkodzenia lub w przypadku znacznych zmniejszeń do użytkownika zwrócić, należy przynajmniej na nowo.

Pod wpływem okresu używania lub przeprowadzonych procesów prania możliwe jest zanieczyszczenie lub zmianą barwy poszoki (zabrudzenie), a także istnieć możliwość zbarwienia się wypełnienia wyrzółu.

Gwarantowany okres użytkowania wyrobu wynosi 2 lata, bez utraty pieniężnych właściwości, przy założeniu stosowania wyrobu zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji i w jego oznakowaniu.

W przypadku pojawienia się reakcji uczuleniowych lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych związanych z użytkowaniem wyrobu, należy natychmiast zaprzestąć używania i skonsultować się z lekarzem.

Wyroby należy transportować w oryginalnym opakowaniu. W trakcie transportu i przechowywania należy zabezpieczyć wyroby przed zabrudzeniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym.

Należy przechowywać i używać w suchym, przewietrzonym, pozbawionym wilgoci i nadmiernego ciepła pomieszczeniu. Nie należy wyłożyć na działanie promieni słonecznych i wilgoci. Wyroby zabezpieczyć przed nadmierną ekspozycją na ciepło, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i zbrode ciepła m. in. koryteń, piekarni, piekarni. Wyroby powinien być poddawany co najmniej 2 cyklom procesu konserwacji w ciągu roku. Nie przechowywać wyroby zabrudzonego lub zanieczyszczonego. Nie prac z systemami innego typu. Po przeprowadzeniu procesów prania należy mocno strząsnąć poduszki.

	Maksymalna temperatura prania 60°C, proces normalny.		Dozwolone suszenie w suszarni bębnowej (temperatura tła, temperatura wyłożenia max. 60°C).		Nie użyć chemii.
	Nie stosować bielenia.		Nie prasować.		

	Nazwa i adres wydawcy		Znak CE (poświadczanie zgodności z Dyrektywą 93/42/EWG)		Model		Data wydawania
	Informacje nieuwzględnione na opakowaniu (etykiecie)		Konieczność zapoznania się z instrukcją używania, przed rozpoczęciem stosowania		Chroń przed działaniem promieni słonecznych		Przechowywać w suchym miejscu

UWAGA: Wyrób należy poddawać okresowej procedurze prania w wysokiej temperaturze, okresowemu działaniu niskich temperatur (zamrażaniu), a także zalecane jest stosowanie środków rozcieńczających, w celu eliminacji alergenów.

Wypełnienie: 100% poliester silikonowany.

Rozmiar wyrobu podany na etykiecie.



Numer i data wydania instrukcji: IUJCE/PAB/Rev.0/11.2015

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			Nr		P619	Auchan
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM					PODUSZKA - BASIC FIRM	
OPRACOWANE przez /PREPARED by					50x60 - gładka /	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by					zaszywana /stębnówce	
/date/		/signature/		/signature/		
		Teresa Purcel		NAPYCHANIE P3		
21.03.2022 E.Sajko					Data : 25.09.2019 Teresa Purcel	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		Mikrofibra Biała 72g/m2		
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		0,32 mb		
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %		5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		55 x127cm poszewka po uszyciu i wywróceniu powinna mieć 63cm zaszywa szwacz		
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		SMF22-A1-01		
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %				
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size				
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap				
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %				
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size				
KROJENIE	Linia nr	Line number				
CUTTING	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift				
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	P - 3	P - 4		
FIBRE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2000szt	3200 szt		
	Waga w kg	Weight in kg	330g	330g (Virgin)		
	+ % Odpadu	Scrap %				
ZGRZEBLANIE	Waga flisa z rozkroju i z wykurczem	Weight in kg				
CARDING	+% Odpadu	Scrap %				
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift				
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number				
QUILTING	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift				
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		AUTOTIC - poszewka wywracana szwem do środka		
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	2800 szt	2800 szt - Pillowtick		
				ov - igły - 12,00 mb -pernacoren / 1 szt overlocki 4-ro nitkowe		
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	ov- 12mb, ch- 25mb	chwytacze - 25,00mb lub -0,0015 kg - Vilcaty - boki / 1szt		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		nici do zaszycia poduszki / maszyna stębnowa - 1,50mb pernacoren		
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift				
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	P3 - overlock AUTOMAT	1100 szt		
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	9mb zaszycie			
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %				
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1200szt - worek - prasa	1200szt + worek foliowy z nadrukiem pakowanie . próżniowe		
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift				
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	2000szt kx14	1300 szt kx14		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift				
					800x600x500 z nadrukiem JCE	
OPIS DODATKOWY				waga poduszki na gotowo		
ADDITIONAL DESCRIPTION				50x60 - 40g		
				330g		
				waga min - 350g max -370g		