


KARTA PRODUKTU			P624	
Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
2022.05.12	Teresa Grycaj	Poduszka extra firm 		
Klient / Kraj dostawy	AUCHAN			
Nazwa produktu	PODUSZKA BASIC QUILTED EXTRA FIRM			
Rozmiar	40x40			
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowego wyrobu	waga gotowej poduszki min - 310g max - 330g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP40-MFA1-P624			
Kod kreskowy EAN	EAN: 5905428026821			
Nr modelu / REF	PABE 1			
Opis materiału / szerokość	Mikrofibra Biała 72 g/m² - szer tkaniny 220cm SMF22-A1-01			
Opis poszewki	POSZEWKA KUPOWANA - SPP40-MFA1-P484			
Wzór pikowania	KANAL FAŁĄ CO 5CM PIKOWANIE ŚCIEGIEM 4 			
Waga i rodzaj wypełnienia	270 g kulka poliestru regenerat-SKRĘT 5S			
Linia i maszyna	AUTOTIC 1 / P4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE				
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C)			
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	WOREK Z NADRUKIEM 400X500			
Rodzaj zamknięcia	PRASA			
Etykieta informacyjna	ulotka medyczna			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	2 ETYKIETY DO NAKLEJENIA na karton z kodem 15905428026828	PODUSZKA BASIC QUILTED EXTRA FIRM 40x40  Ilość szt. 20 WPP40-MFA1-P624	
TRANSPORT/ Paletowanie	Ilość szt. w kartonie	20		
	Ilość kartonów na palecie	6		
	CHEP			
WSZYWKI PIĘLĘGNACYJNA WSZYTA PRZY ZASZYWANIU PODUSZKI. Na wszywce WBIĆ PRZED SPAKOWANIEM data produkcji (DD-MM-RRRR) + numer szwacza . PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE STRONY KARTONU (prawy górny róg wąskiego i szerokiego boku) NA ETYKIETACH ZBIORCZYCH NABITA DATA PRODUKCJI + NUMER PAKOWACZA .				

P624

worek z nadrukiem

etykieta zbiorcza na karton

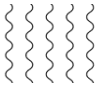

wszywka pielęgnacyjna

ULOTKA MEDYCZNA

PODUSZKA BASIC QUILTED EXTRA FIRM

40x40



15905428026828

Ilość szt. 20

WPP40-MFA1-P624

SWEAU-45



John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska 1
www.johncotton.eu
tel.: +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 629

PODUSZKA BASIC QUILTED EXTRA FIRM 40x40

Poszycie: 100% pollester (mikrofibra)

Wypełnienie: 100% pollester silikonowany

Jakość: I KJ

REF PABE 1



Data wytworzenia
Patrz na odwrocie,
Metkę zachować do reklamacji


OEKO-TEX®
TEKSTYLIA GODNE ZAUFANIA
STANDARD 100
IW 00056 IW

Zbadana na substancje szkodliwe.
www.oeko-tex.com/standard100



5 905428 02682 1

CE

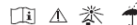

Wyprodukowano w Polsce
M/JCE/11.1.2019



Przed przystąpieniem do używania wyrobu należy uważnie zapoznać się z instrukcją używania. Instrukcja przekazana jest w celu poinformowania o prawidłowym użytkowaniu wyrobu. Wyrób należy stosować zgodnie ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania wyrobu oraz w każdym przypadku podejrzania choroby alergicznych należy skonsultować się z lekarzem.

PODUSZKA BASIC QUILTED EXTRA FIRM

REF PABE 1

PRZEWIDZANE ZASTOSOWANIE

Podstawą leczenia chorób alergicznych jest unikanie alergenów, czyli czynników wywołujących uczulenie. Uważa się, że na podłożu poliestrowym gładki alergen cotwika, czyli roztocze kurzu domowego, nie namnaża się – dlatego poduszka o takim składzie stanowi materiał barierowy przed tym alergenem. Poduszka Basic Quilted Extra Firm przeznaczona jest do stosowania wspomagającego¹⁾ w zapobieganiu i łagodzeniu przebiegu poniższych chorób alergicznych²⁾, jako jeden z elementów wielokierunkowego działania przeciwalergicznego do ograniczenia ekspozycji na alergeny alergiczny przewlekły katarz nosa, astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry, innych chorób o podłożu alergicznym (np. zapalenie spojówek, zakaż, krtani, gardła i migotkiw podniebieniowych).

¹⁾ W każdym przypadku podejrzenia choroby alergicznych należy zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować wyrobu jako jedynej ścieżki zmięgniętego do łagodzenia lub przeciwalergicznego objawów choroby alergicznych.

²⁾ Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD-10, odpowiednio: J30, J45, L20, H10, J22, J37, J31, J35.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Poduszka powinna być stosowana pod głowę i/lub w otoczeniu sztywnym kregoslupa, podczas odpoczynku lub snu, u osób cierpiących na alergie (alergików) i osób zdrowych. W celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, wyrób używać zawsze powieszony w pozostawie bawełniany. Należy oddzielić poduszkę, aby zapobiec zaryzaniu się jej wypełnienia.

Poduszka jest przeznaczona do użytkowania w warunkach użytkowania, o ograniczonej ekspozycji (maksymalny czas dozwolonego użytkowania od 10 do 12 godzin). W przypadku dłuższego użycia należy obowiązkowo przewietrzyć wyrób. Wyrób stosować zgodnie z przewidzianym zastosowaniem oraz z informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji.

PRZECIWKAZANIA DO STOSOWANIA

Nie stosować w przypadku osób, u których stwierdzono uczulenie na pollester. Nie stosować w razie wystąpienia zmian skórnych, innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórę, otwarte niezabliźnione opatrunkiem rany i/lub owrzodzenia.

OSTRZEŻENIA

Wyrób jest wyrobem włókiennym, osobnego użycia. Ze względów zdrowotnych i higienicznych, wyrób nie może być jednocześnie lub ponownie używany przez inne osoby. W przypadku konieczności ponownego użycia przez inne osoby, przed użyciem należy obowiązkowo przeprowadzić proces prania wyrobu i stosowaną poszewkę.

Wyrób należy stosować zawsze powieszony w dodatkowej poszewce.

Nie przechowywać oraz nie używać wyrobu zawilgoconego i/lub przemoczonego. Nie stosować wyrobu w wilgotnych, zakurczonych pomieszczeniach.

Nie stosować wyrobu w przypadku uszkodzenia, zniekształcenia lub zabrudzenia (znacznego zanieczyszczenia). W razie uszkodzenia lub w przypadku znacznych niemiłych do usunięcia zabrudzeń, należy wymienić wyrób na nowy. Pod wpływem okresu użytkowania lub przeprowadzonych procesów prania możliwe jest zmniejszenie lub zmiana barwy poszycia (złotnienie), a także istnieć możliwość zrywania się wypełnienia wyrobu.

Gwarantowany okres użytkowania wyrobu wynosi 2 lata, bez utraty pierwotnych właściwości, przy założeniu stosowania wyrobu zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji i w jego oznakowaniu. W przypadku powstania niekorzystnych lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych związanych z użytkowaniem wyrobu, należy natychmiast zaprzestąć używania i skonsultować się z lekarzem.

SPOSÓB PRZECIWKAZANIA I KONSERWACJI

Wyrób należy transportować w oryginalnym opakowaniu. W trakcie transportu i przechowywania należy zabezpieczyć wyrób przed zabrudzeniem, uszkodzeniem, zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym. Wyrób przechowywać i używać w suchym, przewiewnym, pozbawionym wilgoci i nadmiernego kurzu pomieszczeniu. Nie narażać wyrobu na działanie niskich temperatur i wilgoci. Wyrób zabezpieczyć przed nadmierną ekspozycją na kurz, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródła ciepła (np. kaloryfery, grzejniki, piekarniki). Wyrób powinien być poddawany, co najmniej 2-3 praniem (konservacji) w ciągu roku. Nie przechowywać wyrobu, zabrudzonego lub zawilgoconego. Nie prać z wyrobami innego typu. Po przeprowadzonym procesie prania należy mocno stępnąć poduszkę.

NALEŻY STOSOWAĆ NASTĘPUJĄCE PARAMETRY PROCESU KONSERWACJI

	Maxymalna temperatura prania (60°C, proces normatywny)		Dozwolona liczba prani w czasie (maksymalnie 10 prani)		Nie używać chemicznie
	Nie stosować odbielacza		Nie prasować		

WYJAŚNIENIE SYMBOLI STOSOWANYCH W OZNAKOWANIU WYROBU

	Nazwa i adres wytwórcy		Znak CE gwarantujący zgodność z dyrektywą Rady (WZDZEWG)		Wzrost		Data wytworzenia
	Informacja o odpowiedzialności za opakowanie (wyłącznie)		Informacja o odpowiedzialności za higienę użytkownika, przed rozpoczęciem stosowania		Ochrona przed działaniem promieni słonecznych		Przechowywać w suchym miejscu

UWAGA

Wyrób należy poddawać okresowej procedurze prania w wysokiej temperaturze, okresowemu działaniu niskich temperatur (zamrażaniu), a także zalecane jest stosowanie środków roztoczoobójczych, w celu eliminacji alergenów.

SKŁAD

Poszycie: 100% pollester (mikrofibra). Wypełnienie: 100% pollester silikonowany.

ROZMIAR

Rozmiar wyrobu podany na etykiecie.

WYTWÓRCA
JOHN COTTON EUROPE SP. Z O.O.
ul. Szczawieńska 1, 58-310 Szczawno-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 84 56 446; fax: +48 74 84 56 629
www.johncotton.eu



Numer i data wydania instrukcji: UJCE/PABE/Rev 011 2019

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		P624 Auchan	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		40x40 pikowana	
		pikowana kanał falą co 5cm	
Teresa Purcel		NAPYCHANIE P3	
21.03.2022 E.Sajko		Data : 01.10.2019	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Mikrofibra Biała 72g/m2	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,17 mb	
	+ % Odpadu	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	poszewka po uszyciu i wywróceniu powinna mieć 43cm- zaszywa szwacz	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		
	+ % Odpadu		
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,18 mb	
	+ % Odpadu	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
KROJENIE CUTTING	Linia nr		
	Wydajność na 1 osobe / zmianie		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	P3	P4
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	2000szt	3800 szt
	Waga w kg	270g	270g
	+ % Odpadu		
ZGRZEBLANIE CARDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		0,18 mb kupowana owata 70g/m2
	+% Odpadu		5%
	Wagapanela owaty z rozkroju i z wykurczem		31g
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr		Reachpeace
	Wydajność na 1 osobe / zmianie		2050szt Fala co 5 370mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		NG- 18,00mb- nici Durafix 80 ND- 25,00mb = 0,00031kg nici bobbins Durafix-SNB11-010
SZYCIE	Linia nr		1014 - AUTOTIC - poszewka wywracana szwem do środka
	Zużycie nici w metrach bieżących	1900szt AUTOTIC	1900 szt - Pillowtick - pikowana
	Zużycie w metrach bieżących zamka	ov - igły - 6,00 mb -pernacoren / 1 szt overlocki 4-ro nitkowe chwytacze - 21,00mb lub -0,0015 kg - Vilcaty - boki / 1szt	ov - igły - 6,00 mb -pernacoren / 1 szt overlocki 4-ro nitkowe chwytacze - 21,00mb lub -0,0015 kg - Vilcaty - boki / 1szt 1,20mb pernacoren - nici do zaszycia poduszki / stębnówce
PRZEWRAĆANIE	Wydajność na 1 osobe / zmianie		poszewka wywracana szwem do środka
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	P3 overlock AUTOMAT	1100 szt - zaszycie
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	7,20mb	
	+ % Odpadu		
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	1400szt worek - prasa	1200szt worek foliowy z nadrukiem pak próżniowe
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	2000szt kx20	1400szt kx20
	Worek/prasowanie/karton		

waga gotowej poduszki	
waga składki	60g
wypełnienie	270g
waga gotowej poduszki min - 310g max - 330g	